


TOTALLY REMOVE STERNOBELL ILIAC MARROW OSTEOBELL ESPIANTO

*Knochenmarkbiopsienadel, Knochenmarkaspirationsnadel
und Knochenmarkentnahmenadel*

embemed

embemed

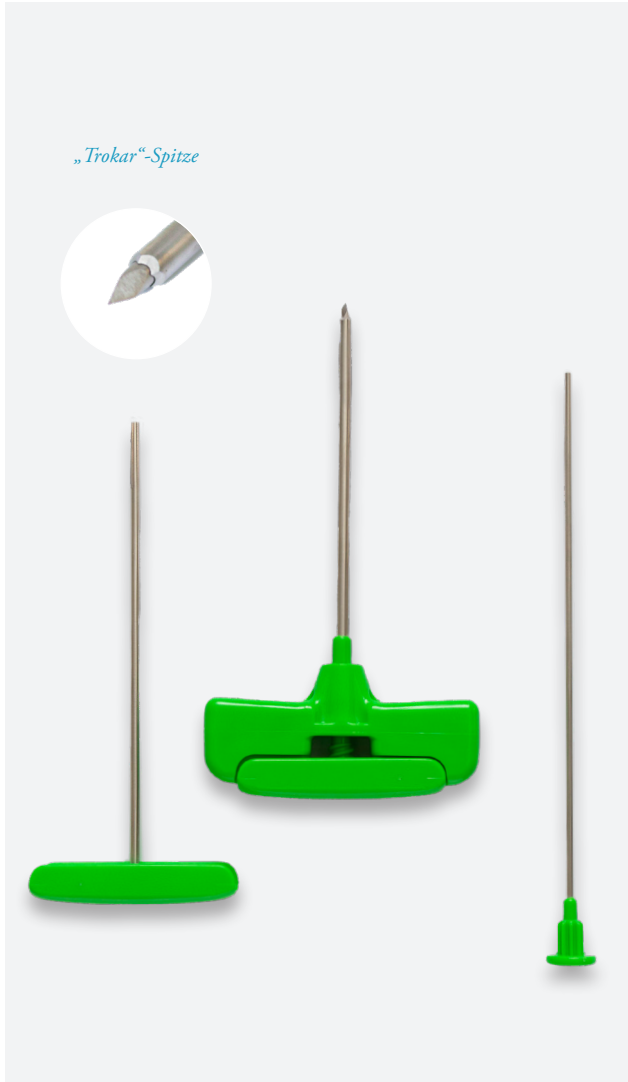


TOTALLY REMOVE

Knochenmarkbiopsienadel

- Die „Trokar“-Spitze des Stiletts garantiert eine schnelle und nicht-traumatische Penetration
- Der ergonomische Griff verbessert den Halt und die Präzision des Biopsie-Einsatzes
- Mit dem universellen Luer-Lock-Anschluss kann jede Spritze verbunden werden
- Die ultrascharfe Kronenspitze der Kanüle erleichtert die Entfernung eines intakten Knochenmarkfragments

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
TO0810	8G x 10 cm	10 Stück
TO0815	8G x 15 cm	10 Stück
TO1110	11G x 10 cm	10 Stück
TO1115	11G x 15 cm	10 Stück

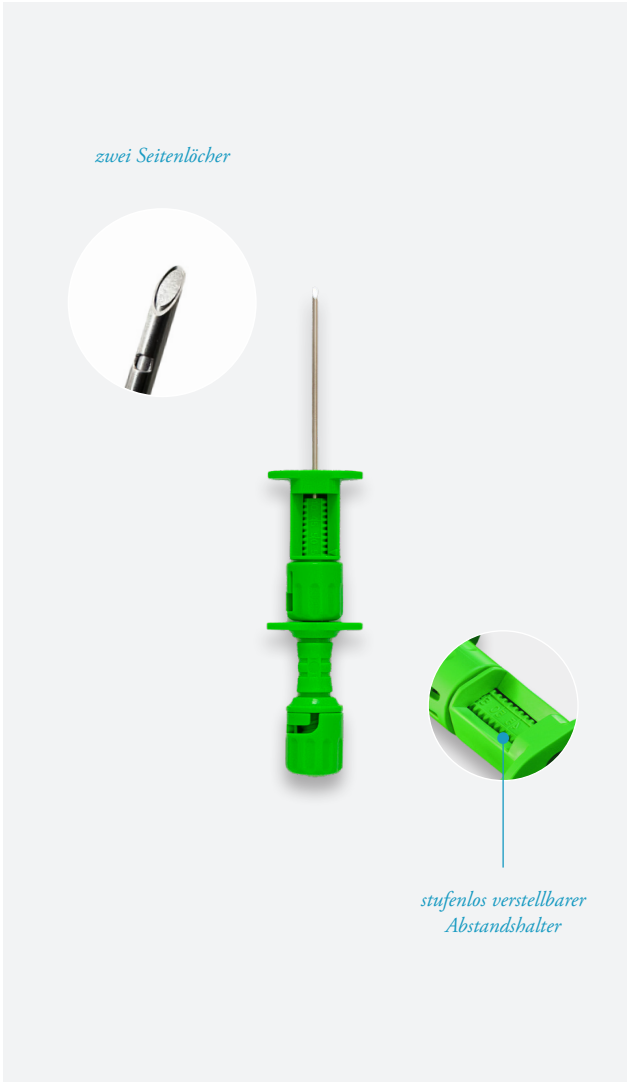


STERNOBELL + EXPLANT

Knochenmarkaspirations + Entnahmenadel

- Luer-Lock Ansatz für schnelle und sichere Aspiration
- stufenlos verstellbarer Abstandshalter
- Abstandshalter vollständig abnehmbar

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
RN1455	14 G x 5,5 cm	20 Stück
RN1525	15 G x 2,5 cm	20 Stück
RN1540	15 G x 4,0 cm	20 Stück
RN1555	15 G x 5,5 cm	20 Stück
RN1840	18 G x 4,0 cm	20 Stück
RN1525	15G x 0,7–3,2 cm	20 Stück
RN1540	15G x 2,2–4,7 cm	20 Stück

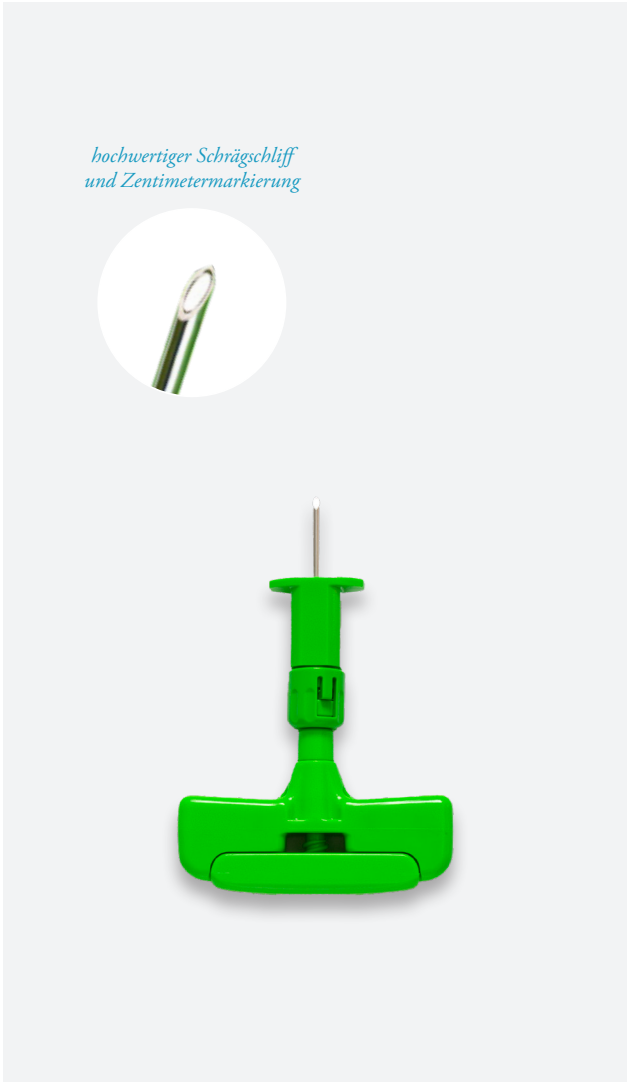

ILIAC MARROW

Knochenmarkaspirationsnadel

- Ergonomischer Griff mit Luer-Lock Ansatz für eine schnelle und sichere Aspiration
- stufenlos verstellbarer Abstandshalter zur Einstellung der Einstichtiefe
- dreifach geschliffene Kanüle ermöglicht ein leichtes und atraumatisches Eindringen

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
IM1507	15G x 7 cm	10 Stück
IM1510	15G x 10 cm	10 Stück



OSTEOBELL ESPIANTO

Knochenmark-Entnahmenadel

- Die fünf Seitenlöcher ermöglichen ein größeres Aspirationsvolumen
- ergonomischer Griff
- Trokarspitze zur sicheren und schnellen Penetration
- Luer-Lock Ansatz
- Zentimetermarkierung

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
OBE1111TC	11G x 11 cm	10 Stück