

M-Biopsy

Automatisches Biopsieinstrument




embemed

embemed

M-Biopsy automatisches Biopsieinstrument

Das M-Biopsy® ist ein vollautomatisches Einweg-Biopsiesystem, das für den klinischen, sowie praxisnahen Alltag entwickelt wurde und eine präzise Gewebeentnahme unter bildgebender Kontrolle ermöglicht. Die ergonomische Einhandbedienung erlaubt eine stabile Führung der Nadel bei gleichzeitiger Nutzung von Ultraschall oder CT, wodurch die Kontrolle verbessert und ungewollte Bewegungen minimiert werden. Damit unterstützt das Gerät eine effiziente, sichere und reproduzierbare Biopsiediagnostik – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

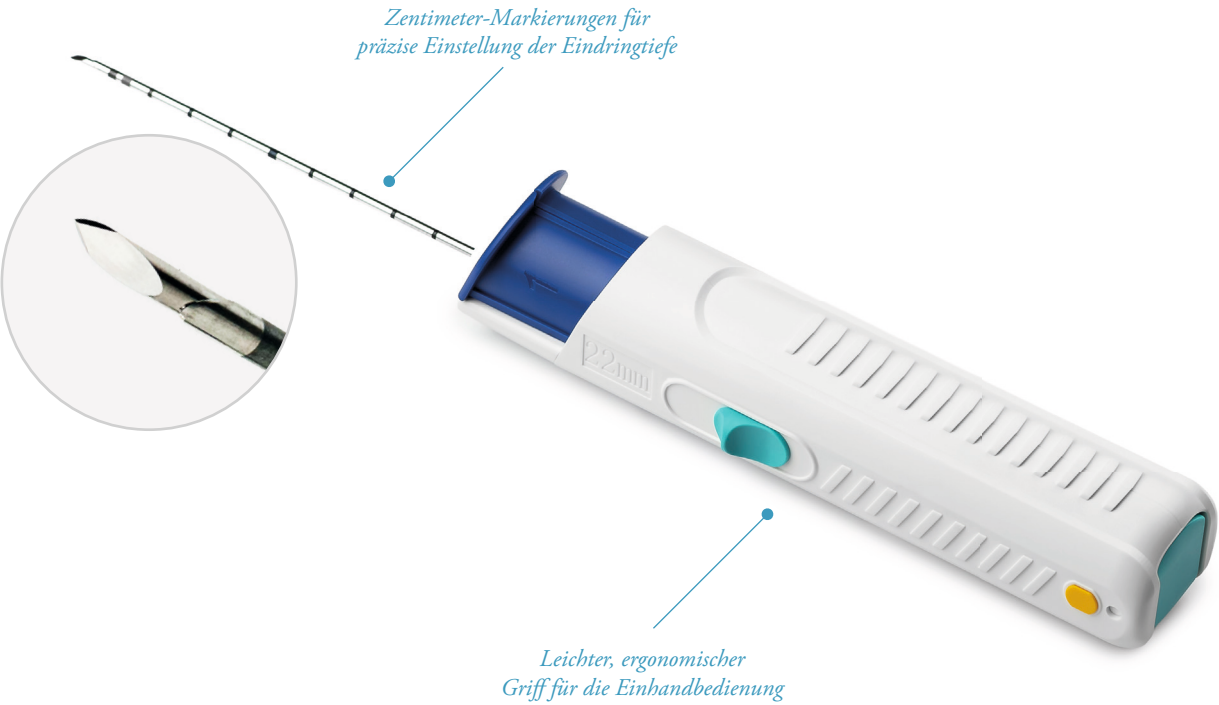


Das M-Biopsy® vollautomatische Einweg-Biopsieinstrument ist ein benutzerfreundliches Biopsiegerät, das entwickelt wurde, um eine hochwertige Biopsieprobe zu liefern.

Es wurde mit Schwerpunkt auf Ergonomie entwickelt, um einen komfortablen Griff zu gewährleisten, unabhängig von der Ausrichtung des Geräts. Die linken und rechten Ladeschieber sichern eine hochwertige Probe, ohne die Schusskraft des Geräts zu beeinträchtigen.

Die M-Biopsy® Koaxialnadel verfügt über eine scharfe Trokarspitze und einen transparenten Nadelhülse. Die Nadel ist mit einem zusätzlichen stumpfen Führungsdraht ausgestattet, um Gewebe, Blutgefäße und Organe möglichst wenig zu beschädigen.

Sowohl Stylet als auch Kanüle sind federbasiert und schießen nach vorne durch das Gewebe, um eine Biopsieprobe zu entnehmen.

Automatisches Biopsieinstrument

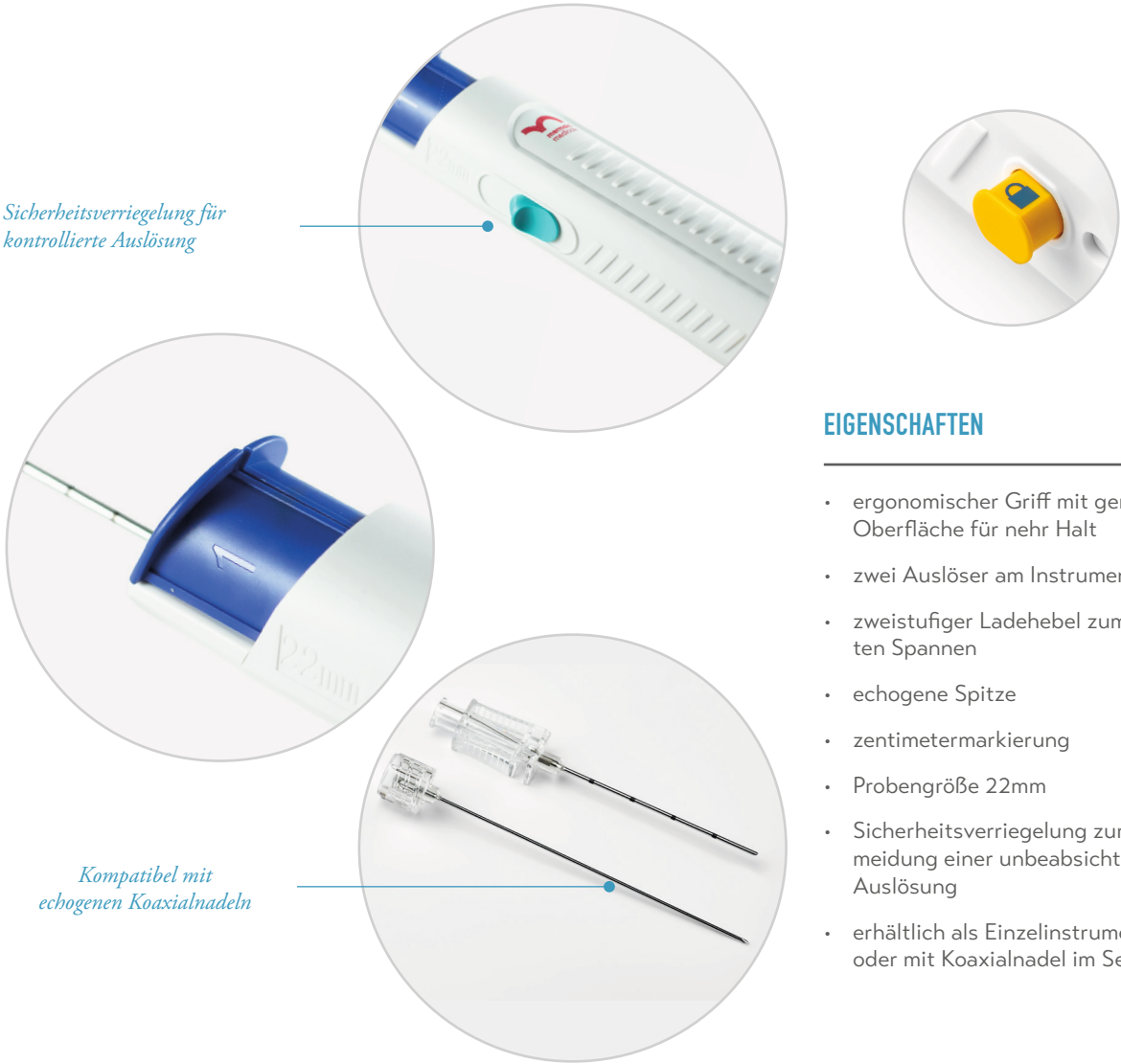

EIGENSCHAFTEN

- ergonomischer Griff mit geriffelter Oberfläche für mehr Halt
- zwei Auslöser am Instrument
- zweistufiger Ladehebel zum leichten Spannen
- echogene Spitze
- zentimetermarkierung
- Probengröße 22mm
- Sicherheitsverriegelung zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Auslösung
- erhältlich als Einzelinstrument, oder mit Koaxialnadel im Set.

BESTELLUNG

M-BIOPSY AUTOMATISCHES BIOPSIEINSTRUMENT				SET AUS BIOPSIEINSTRUMENT UND KOAXIALNADEL			
BESTELLNUMMER	GRÖSSE	LÄNGE	PRO PACKUNG	BESTELLNUMMER	GRÖSSE	LÄNGE	PRO PACKUNG
N7011410-CE	14 G	10 cm	5 Stück	NS7011410-CE	13 G	4,8 cm	5 Stück
N7011416-CE	14 G	16 cm	5 Stück	NS7011416-CE	13 G	10,8 cm	5 Stück
N7011610-CE	16 G	10 cm	5 Stück	NS7011610-CE	15 G	4,8 cm	5 Stück
N7011810-CE	18 G	10 cm	5 Stück	NS7011810-CE	17 G	4,8 cm	5 Stück
N7011816-CE	18 G	16 cm	5 Stück	NS7011816-CE	17 G	10,8 cm	5 Stück
N7011820-CE	18 G	20 cm	5 Stück	NS7011820-CE	17 G	14,8 cm	5 Stück
N7011825-CE	18 G	25 cm	5 Stück	NS7011825-CE	17 G	17,8 cm	5 Stück