

Curaway

Vollschnitt Biopsieinstrument

Mit freundlicher Unterstützung
unseres Vertriebspartners



embemed


embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH · Marlowring 4 · 22525 Hamburg
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de · shop.embemed.de



embemed

Curaway Vollschnitt Biopsieinstrument

Mit dem Vollschnitt-Biopsieinstrument lassen sich präzise größere Gewebemengen in hoher Qualität entnehmen. Der leichte, ergonomische Griff ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung. Der integrierte Fangmechanismus und das zangenartige Design der Außenkanüle sorgen für sauberes Abschneiden, zuverlässige Aufnahme und sicheren Halt der Probe.

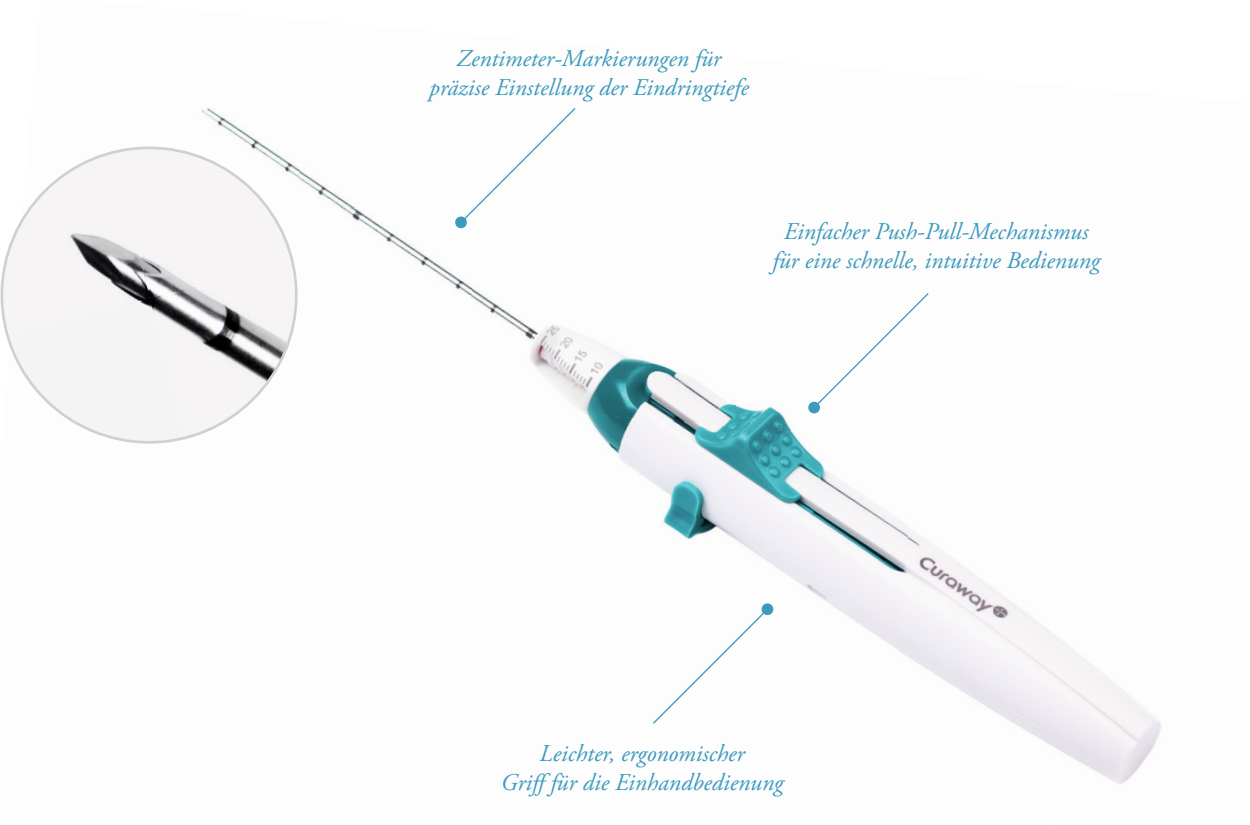

Der integrierte Fangmechanismus stabilisiert die Probe, schützt sie vor Quetschung und Fragmentierung – auch bei Verwendung einer coaxialen Punktionsnadel. So bleibt der Gewebezylinder intakt und die Struktur für die pathologische Auswertung erhalten.


Die kompakte Bauweise minimiert Hohlraumverlust, schont umliegendes Gewebe und erhält die Probengröße.

Ein einstellbarer Auslöseweg von 10–25 mm ermöglicht die Anpassung an Organ, Probengröße und Patienten-anatomie. Die 20-G-Variante ist ideal für CT-gestützte Lungenbiopsien.

Ein leichter Handgriff und seitlicher Auslöser erlauben präzise Einhandsteuerung und verbessern die Kontrolle.

Zentimeter-Markierungen und eine Bereitschaftsanzeige erleichtern die Handhabung und erhöhen die Sicherheit bei bildgestützten Verfahren.

Vollschnitt Biopsieinstrument

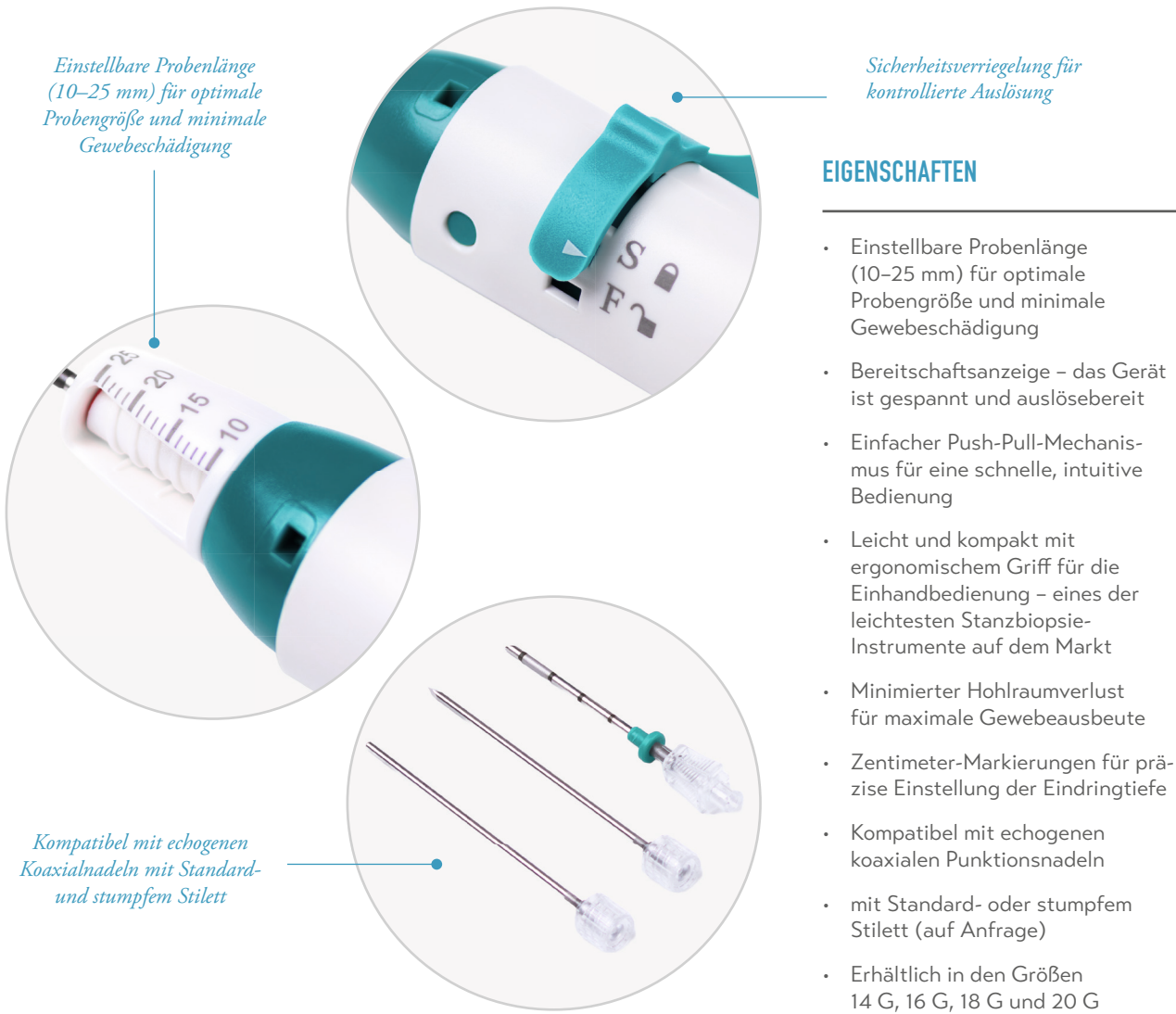

EIGENSCHAFTEN

- Einstellbare Probenlänge (10–25 mm) für optimale Probengröße und minimale Gewebeschädigung
- Bereitschaftsanzeige – das Gerät ist gespannt und auslösebereit
- Einfacher Push-Pull-Mechanismus für eine schnelle, intuitive Bedienung
- Leicht und kompakt mit ergonomischem Griff für die Einhandbedienung – eines der leichtesten Stanzbiopsie-Instrumente auf dem Markt
- Minimierter Hohlraumverlust für maximale Gewebeausbeute
- Zentimeter-Markierungen für präzise Einstellung der Eindringtiefe
- Kompatibel mit echogenen coaxialen Punktionsnadeln
- mit Standard- oder stumpfem Stilet (auf Anfrage)
- Erhältlich in den Größen 14 G, 16 G, 18 G und 20 G

BESTELLUNG

CURAWAY VOLLSCHNITT BIOPSIEINSTRUMENT				KOAX. EINFÜHRNADELN FÜR CURAWAY VOLLSCHNITT BIOPSIEINSTRUMENT			
BESTELLNUMMER	GRÖSSE	LÄNGE	PRO PACKUNG	BESTELLNUMMER	GRÖSSE	LÄNGE	PRO PACKUNG
BN-OCR-13/1410	14 G	10 CM	5 Stück	BN-MAR-5/13050	13 G	5 CM	10 Stück
BN-OCR-13/1416	14 G	16 CM	5 Stück	BN-MAR-5/13110	13 G	11 CM	10 Stück
BN-OCR-13/1610	16 G	10 CM	5 Stück	BN-MAR-5/15050	15 G	5 CM	10 Stück
BN-OCR-13/1616	16 G	16 CM	5 Stück	BN-MAR-5/15110	15 G	11 CM	10 Stück
BN-OCR-13/1810	18 G	10 CM	5 Stück	BN-MAR-5/17050	17 G	5 CM	10 Stück
BN-OCR-13/1816	18 G	16 CM	5 Stück	BN-MAR-5/17110	17 G	11 CM	10 Stück
BN-OCR-13/1820	18 G	20 CM	5 Stück	BN-MAR-5/17150	17 G	15 CM	10 Stück
BN-OCR-13/2010	20 G	10 CM	5 Stück	BN-MAR-5/19050	19 G	5 CM	10 Stück
BN-OCR-13/2016	20G	16 CM	5 Stück	BN-MAR-5/19110	19 G	11 CM	10 Stück