

PEEK Marker

Brustgewebemarker

embemed

embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de




embemed


Mit freundlicher Unterstützung unseres Vertriebspartners **GEOTEK[®]**
Healthcare Products

PEEK Marker


Der PEEK Brustgewebemarker wurde speziell für eine bessere Sichtbarkeit im Ultraschall entwickelt. Die besondere Form und die Oberflächenstruktur verhindern die Migration im Körper.

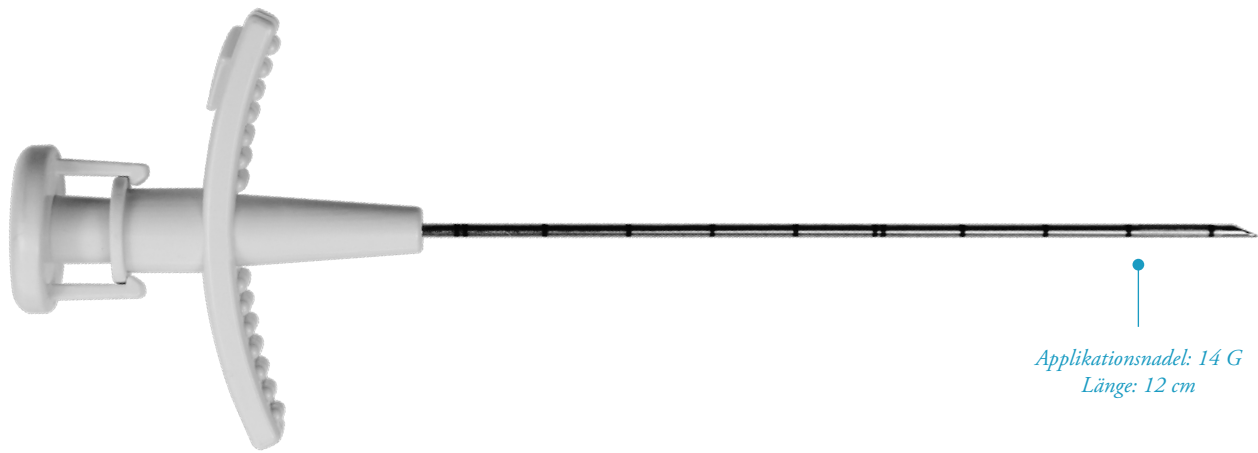

Applikationsnadel: 14 G
Länge: 12 cm

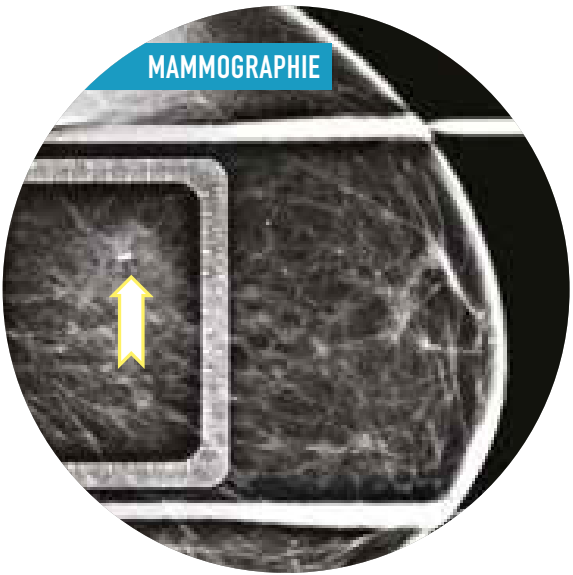

MAMMOGRAPHIE

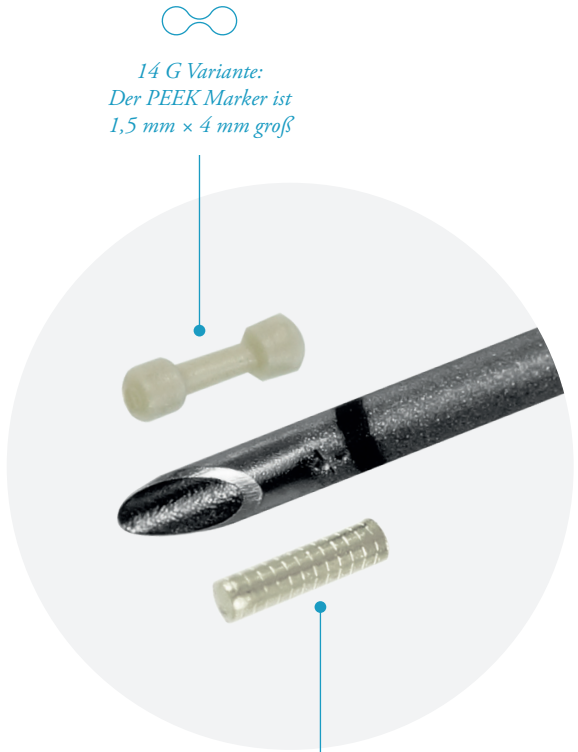

14 G Variante:
Der PEEK Marker ist
1,5 mm x 4 mm groß



PEEK Marker Form bei
Applikationsnadel in
16 G und 18 G

Der PEEK Brustgewebemarker ist aus Polyetheretherketon Polymeren, wie sie routinemäßig in oralen und anderen chirurgischen Implantaten verwendet werden.

Dank der nachgewiesenen Biokompatibilität ist ein dauerhaftes Verweilen im Brustgewebe möglich.

Das PEEK Material bleibt bei allen bildgebenden Verfahren permanent sichtbar. Da der Marker metallfrei ist, treten durch ihn im MRT weniger Artefakte auf als bei Gewebemarkern aus Metall.

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Sichtbarkeit in:
 - » Ultraschall
 - » Röntgen
 - » Mammographie
 - » MRT
- Spezielle Form und die geriffelte Oberfläche verhindern die Migration des Markers.
- Entwickelt zur präoperativen Lokalisierung von Weichgewebstumoren und zur radiologischen Markierung für die genaue Ortsbestimmung des Zieltumors während einer Strahlenbehandlung.
- Applikationsnadel standardmäßig in 14 G. Weitere Größen, wie z.B. 16 G und 18 G auf Anfrage.

Anwendungsvideo bei YouTube ansehen:



BESTELLUNG

BESTELLNUMMER	NADEL	MARKERGRÖSSE	BESCHREIBUNG	PRO PACKUNG
GTP1412	14 G x 12 cm	1,5 mm x 4 mm	PEEK Marker	10 Stück

Applikationsnadeln in 16 G, 18 G oder andere Längen auf Anfrage.